


Pressure Safe



Yeni Nesil Güvenli Neonatal Ram Kanül Sistemi

En Değerli Hediyelerinize Bakarken Bizim Hassas Dokunuşumuza İhtiyacınız Var...
Bebğiniz için Pressure Safe™ Nazal Kanülü Kullanın...
DEHP içermeyen YENİ formülüyle....

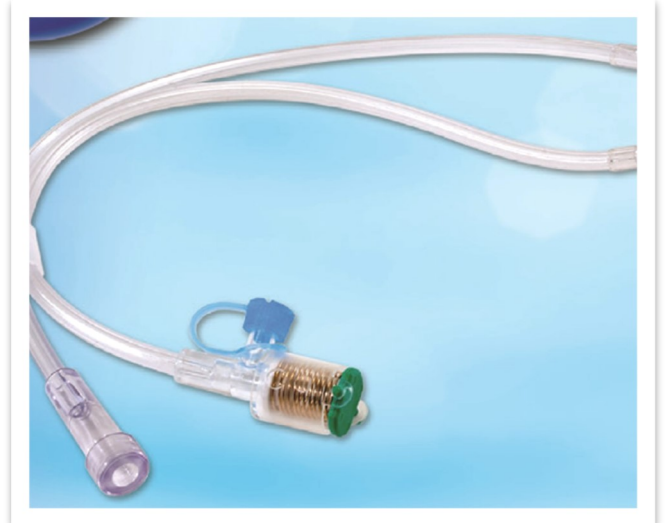

Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Kozyatağı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL
0 850 255 0 779 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr

Pressure Safe



Yeni Nesil Güvenli Neonatal Ram Kanül Sistemi

- ◆ The Pressure Safe High Flow Kanül **barotravma** durumlarına neden Olabilecek yüksek basınç değişikliklerini izlemek için tasarlanmıştır.
- ◆ Özel tasarlanmış basınç sabitleyici supabı, akan hava basıncının 21 cm H₂O'den yüksek olmasını önler.
- ◆ Basınç koruma sayesinde, yüksek akım terapilerinde gerekli basınç fazlalıkları artık çok rahat gözlemleniyor ve kontrol ediliyor.
- ◆ Buna ek olarak, Comfort Soft Plus™ patentli elastomerik formülasyonu hasta cilt alanında kanül sürtünmesini en aza indirir. Bundan dolayı da geleneksel PVC kanül veya yapışkan sabitleme bantlarından daha güvenli bir sistemdir.

Avantajları Kıyalayın

- Basınç Emniyet Supabı (basınç 21cm H₂O'yu geçmez)
- Comfort Soft Plus Elastomerik malzeme
- Bağlantı adaptörleri: 15mm OD; 15mm ID x 22mm OD
- Fisher Paykel ve Tele Flex/Hudson ısıtmalı nemlendirme sistemleri için yapılandırılmıştır
- Akış oranı: 7,8 ve 10 LPM
- Latex ve DEHP içermez

Sipariş Detayları - Pressure Safe™

KOD	UBB	SUT	Ürün Açıklaması	Kilo Kod Eşleşmesi	Ambalaj Miktarı
0886	5070907808868	OR4270	Bebek Kanül, Yüksek Akışlı w/manometre, Lt Blue, Pop-off Vlave 21cmH ₂ O	800-1500 gr*	10 Adet
0885	5070907808851	OR4270	Bebek Kanül, Yüksek Akışlı Lt Blue, Pop-off Vlave 21cmH ₂ O	800-1500 gr*	10 Adet

*Belirtilen kilolar tavsiye edilen kiloyu işaret eder. Uygun kanülü seçmek için bebeklerin prong aralıklarına en uygun kanül tercih edilmelidir.

Yakında Neonatal ve Pediatrik boyları ile....



Westmed

When Your Care is Critical

Distribütör Bilgileri

Poyraz Tıbbi Cihazlar Medikal
Merkez Ofis : Kozyatağı Mah. Gazi Ethem Paşa Sok.
No:41/A Kadıköy / İSTANBUL
0 850 255 0 779 / info@poyrazmedikal.com.tr
www.poyrazmedikal.com.tr